


ORAL IRRIGATOR

口腔洗浄器

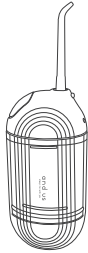

取扱説明書 2511 /AUS -10

ご使用前に必ずお読みください

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。


なお、この取扱説明書には保証書が付いております。お読みになった後も、大切に保管してください。

保証書付


※本書の内容については予告なしに変更することがございます。

安全上のご注意


- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」、及び「注意」に区分しています。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

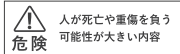

人が死亡や重傷を負う可能性が大きい内容

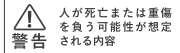


人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

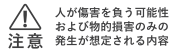


人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例

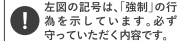

左図の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。

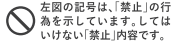

左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはいけません。内容です。

安全上のご注意

△危険



強制

- 火のそばや高温の場所で充電・保管・放置しない
 - ・周囲温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(金属の箱や夏の車内など)に保管・放置しないでください。
 - ・バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火のおそれがあります。
- 充電ポートや充電ケーブルのプラグ部分に水や埃がある状態で充電しない
 - ・火災、感電、けが、破損の原因になります。
- 火への投入、加熱をしない
 - ・バッテリーが内蔵されているため発火、破裂のおそれがあります。
- 本体に釘を刺す、切る、潰す、投げ、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない
 - ・発熱、発火、破裂のおそれがあります。
- 本製品を分解、修理、改造はしない
 - ・発火、発煙、感電などの原因となります。

△警告



強制

- 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する
 - ・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂のおそれがあります。
- 以下の症状のときは使用を中止する
 - ・本製品が異常に熱い
 - ・本製品に深いキズや変形がある
 - ・焦げくさい臭いがする
 - ・ビリビリと電気を感ずる
 - ・動作しないなど不具合が生じた場合

安全上のご注意

△警告



強制

- 充電ケーブルが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように場所で充電する
 - ・発煙、発火、感電のおそれがあります。
- 充電ケーブルなど破損、取り付け状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認する
 - ・異常がある場合は使用しないでください。
- 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、ただちに使用を中止する
- 歯周病の疑いのある人、歯や口腔内に気になる症状がある人、治療中は歯科医に相談のうえ使用する。



強制

- 本製品を分解、修理、改造はしない
 - ・発火、発煙、感電などの原因になります。
- 本製品を口腔洗浄以外の目的に使用しない
- 充電を行うときは、本体、充電ケーブルを濡れた手で触れない
 - ・感電のおそれがあります。
- 強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない
 - ・発煙、発火、けがのおそれがあります。
- 以下のような場所で充電・保管・放置しない
 - ・窓際など雨や直射日光の当たる場所
 - ・油煙や湯気、湿気の多い場所
 - ・寒暖の差が激しい場所
 - ・腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所
 - ・ベッドや小さなお子様の手の届く場所

安全上のご注意

△警告



強制

- 内部のバッテリーから漏れ出た液体に不意に触れない
 - ・万が一、バッテリー液が目に入ったら、ただちにきれいな水で十分洗い医師の診察を受けてください。
 - ・バッテリーの液は炎症やけどの原因になることがあります。
- 内部バッテリーの液が漏れたら火気から遠ざける
- 周囲温度が10℃未満、または周囲温度が35℃以上の環境では充電しない
 - ・破裂や火災のおそれがあります。
- 充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない
 - ・破裂や火災のおそれがあります。
- ノズルは家族や他人と共有しない
 - ・感染や炎症の原因になります。
- ノズルの先端を歯や歯ぐきに強く当てたり、一箇所に長くあてすぎたりしない
 - ・歯や歯ぐきを傷つける原因になります。
- 口腔内の感覚が弱い方は使用しない
 - ・怪我をしったり歯や歯茎、舌を痛める原因になります。
- 自分で正しく操作出来ない人、取扱説明書の指示が理解できない人には使用させない
 - ・怪我をしったり歯や歯茎、舌を痛める原因になります。
- 本体を水洗いしたり、水没させない
 - ・本製品は防水等級IPX7ですが、意図的に水に浸けたりはしないでください。

安全上のご注意

△注意



強制

- 乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
 - ・感電、けがのおそれがあります。
- 使用中に気分が悪くなった場合や歯茎から血が出た場合は、ただちにご使用を中止する
 - ・事故や体調不良の原因になります。
- 付属のノズルのみ使用する
 - ・事故・故障などの原因になります。



強制


- 本製品の給水口に異物をいれない
 - ・故障などの原因になります。
- 使用時間が極端に短くなった場合は使用しない
- 本製品に破損や亀裂、変形がある場合は使用しない
 - ・発煙、発火、けがの原因になります。

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。

使用上のご注意


- 水道水、ぬるま湯以外(口腔洗浄液、塩、薬品など)をタンクに入れないでください。
- タンクに40℃以上のお湯を入れないでください。
- 使用する際は、必ずノズルを付けてください。
- この製品は歯磨きの代用になるものではありません。歯磨きと併用してお使いください。
- 使いはじめは、刺激により出血する場合があります。出血が続く場合は、歯ぐきに異常があることが考えられます。使用を中止し歯科医にご相談ください。
- この製品はIPX7 (JIS 防水保護等級)の防水性能がありますが、限度以上の防水性能はありません。本製品の安全性と機能確保のため、恒常的に浴室、シャワー室などではご使用や放置はしないでください。

各部の名称

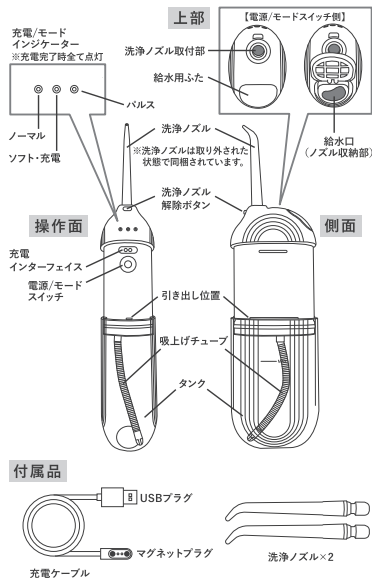

充電のしかた

- 次のようなときは充電をしてください。
 - ・ご購入後はじめてご使用になるとき
- ※ご購入時は電池が十分に充電されておられませんので、ご使用前に必ず充電してください。
 - ・長期間ご使用にならないとき

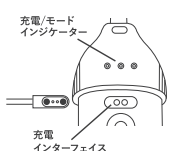

充電

- USBポート(ACアダプター、パソコンなど)から充電する際は、必ず付属の充電ケーブルを使用してください。
- 100Vコンセントを使用して充電する際は、市販のACアダプターを使用してください。
- 充電ケーブルのUSBプラグ側を電源を供給するUSBポートに接続してください。
- 本体の充電インターフェイスが濡れていないことを確認してください。濡れている場合は、水分をきれいに拭き取ってください。
- 充電ケーブルのマグネットプラグ側を本体の充電インターフェイスに接続すると充電を開始します。
- 充電中は[ソフト/充電]インジケーターが白点滅し、満充電になると3つのインジケーターが全て白点灯します。
- 『充電時間の目安』 約3時間
- ※充電中はご使用できません。
- 充電完了後は、充電ケーブルを取り外してください。

充電のしかた

市販のACアダプターでの充電について

- 本製品は市販のACアダプターで充電することができます。
- ACアダプターの推奨仕様
 - ・出力(OUT PUT): DC5V/1A
 - ・出力端子: USB (Type-A) 端子
- ※市販されている全てのACアダプターで充電できることを保証するものではありません。

充電切れについて

- 電池残量が少なくなると、[ソフト/充電]インジケーターが約10秒白点滅します。
- 充電切れの場合、[電源/モード]スイッチを押すと[ソフト/充電]インジケーターが3回白点滅します。


お願い

- プラグを外すときは、コードを持たずに先端のプラグを持ってください。断線による故障の原因になります。
- ラジオやテレビなどに雑音が入るときは、市販のACアダプターなど充電器を2m以上テレビなどから離してください。

使用方法


1. 洗浄ノズルの取付け

- ①付属の洗浄ノズルを[洗浄ノズル取付部]に「カチッ」と音がするまで、しっかりと挿し込みます。

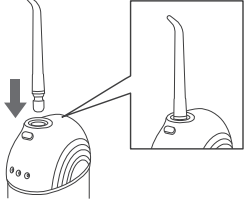

2. タンクに給水


- ①本体を「引き出し位置」まで引き上げます。

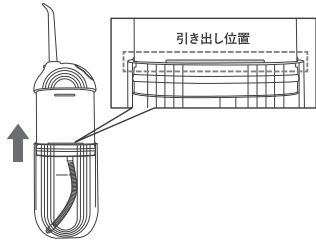

10

使用方法


- ②給水用ふたを開けて、本体に水道水、またはぬるま湯（40℃以下）をMAX線まで入れます。

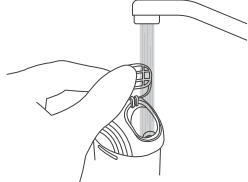

- ③給水用ふたをしっかりと閉めます。

3. 口の中を洗浄

- ①洗面ボウルの上に顔を出します。
②口の中に洗浄ノズルを入れ、本体を立てます。
③口を軽く閉じます。

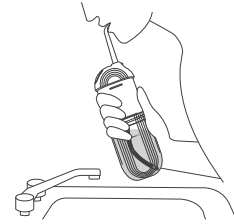

11

使用方法

- ④[電源/モード]スイッチを押すと電源がONになり、はじめでお使いのときはノーマルモードで水が出ます。
⑤[電源/モード]スイッチを押すごとにモードが切り替わります。
※モード切り替えのスイッチ操作は3秒以内に行ってください。3秒を過ぎてスイッチを押すと電源がOFFになります。



モード	インジケーター	満水時における洗える時間の目安(約)
ノーマル	○ ● ●	30秒
ソフト	● ○ ●	40秒
パルス(間欠)	● ● ○	40秒

- ⑥どのモードでも3秒以上経過した後に[電源/モード]スイッチを押すと電源がOFFになります。

使用上のご注意

- [電源/モード]スイッチを押すと、すぐに水が出るためご注意ください。
必ず口の中に洗浄ノズルを入れ、口を軽く閉じてから[電源/モード]スイッチを押してください。

モード記憶機能

- 電源をONにした時、直前に使用していたモードで動作します。
・モード切り替え時に電源OFFを選んだ場合は、モード記憶がリセットされます。
リセットされた場合、次に電源をONにしたときはノーマルモードで水が出ます。

オートパワーオフ機能


- 電源を入れると、約1分30秒で自動的に電源がOFFになります。

12


使用方法

4. 使い終わったとき

- ①給水用ふたを開けて、タンクに残った水を捨ててください。
※タンク内の水は、毎回必ず捨ててください。雑菌などが繁殖するおそれがあります。

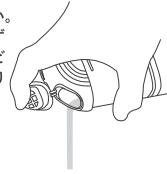

- ②洗浄ノズルの先端を downward 向きにして、[電源/モード]スイッチを押して電源をONにし、本体内部の水を抜き取ります。

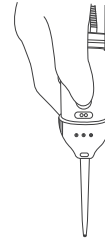

13

- ③水が出なくなったら、[電源/モード]スイッチを押して電源をOFFにします。

お手入れ・保管・廃棄

お手入れ


本体

- 汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
●汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

- ー お願い ー
※住宅用洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使用しないでください。
※水洗いは絶対にしないでください。


洗浄ノズル

- ※使用後は毎回お手入れしてください。
●洗浄ノズル解除ボタンを押しながら、洗浄ノズルを引き抜きます。
●洗浄ノズルは水洗いしたあと、乾燥させて保管してください。
●洗浄ノズルは熱湯消毒できません。
●洗浄ノズルは、給水口の中に収納することができます。その際は、洗浄ノズル、タンクなどをしっかりと乾燥させてから収納してください。

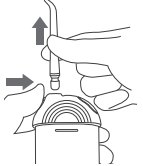

タンク

- ※必要に応じてお手入れしてください。
●片方の手で本体をしっかりと持って、もう一方の手でタンクを downward に少し強く引っ張って取り外します。
●タンクは水洗いしたあと、乾燥させて保管してください。
●タンクは熱湯消毒できません。

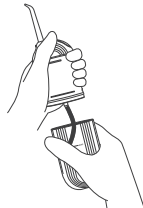

14

お手入れ・保管・廃棄

保管

- 長期間使用しない場合はしっかりと乾燥させ保管してください。
●長期間保管する場合は、過放電防止のため、3か月に一度充電をしてください。
●直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管・充電はしないでください。
●火災・故障の原因になります。
●幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。
●水のかかる場所、湿気の多いところには保管しないでください。

廃棄

- 廃棄する際は、地方自治体の処分方法に従って処理してください。

製品仕様

品名	AUS口腔洗浄機
品番	2511/AUS-10
カラー	グレー
サイズ(約)	取替時:高さ(H)13.2×幅(W)6.6×奥行(D)4.4cm 使用時:高さ(H)25.5×幅(W)6.6×奥行(D)4.4cm(洗浄ノズル装着時)
タンク容量(約)	130mL
質量(約)	206g(洗浄ノズル装着時)
主な材質	本体:ABS、タンク・ノズル:PC
電源	DC5V/1A
定格消費電力	7.5W
充電ポート	マグネット式コネクタ
バッテリー	リチウムイオン電池 1200mAh 3.7V 4.44Wh
充電時間(約)	3時間
使用可能時間(約)	ノーマルモード:35分、ソフトモード:50分、パルスモード:40分
連続使用可能な時間(約)	ノーマルモード:30秒、ソフトモード:40秒、パルスモード:40秒
機能	モード記憶、オートパワーオフ
オートパワーオフ時間(約)	1分30秒
防水等級	IPX7(水の飛びまつりに対する保護)
使用環境温度	10～40℃(充電環境温度:10～35℃)
付属品	充電ケーブル、洗浄ノズル×2、取扱説明書
原産国	中国

※ACアダプターは付属していません。市販のものをご用意ください。

15

保証とアフターサービス(よくお読みください)

- 修理をご依頼いただく前に
修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、異常がある場合は、ご使用を中止してください
修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

- 修理の際は、下記の保証規定の範囲以内で無償修理をいたします。
●販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。
もし印がない場合は販売店にお買い上げの販売店にお申し出ください。
販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。

- ※販売店様へのお願い
お買い上げ日、貴店の所在地・名称・電話番号を記入、捺印の上、お客様にお渡しください。

- ※保証期間内に故障して無償修理をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

- 取扱説明書の注意事項に従った状態で、保証期間内に不具合が発生した場合のみ無償交換をいたします。

- 次の場合には、保証期間でも無償交換の対象外になります。

- ①この保証書の提示がない場合
②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合
③ご使用上の不注意、あやまりによる故障
④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による損傷
⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害及びその他の要因による損傷
⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる損傷
⑦本商品以外に起因する損傷
⑧特に過酷な条件下において使用された場合の損傷
⑨中古品として本製品をご購入された場合(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の損傷
●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
●この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

- この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無料交換をお約束するものです。
本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間内での本保証内容についてご不明な場合、または保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。

16