


AUSEMS美顔ローラー 2521/AUS-08

取扱説明書

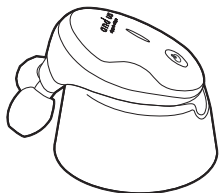

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後はレシートと取扱説明書を一緒に適切に保管してください。

同梱品

パッケージの中に以下のものがすべてそろっていることを確認してください。

- ・本体-----1台
- ・スタンド-----1台
- ・USBケーブル (Type-C)-----1本
- ・取扱説明書兼保証書-----1枚

安全上のご注意

お使いになる前に必ず参照してください。

- ・ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- ・表示と意味は次のようになっています。

図記号の例



警告



注意



禁止

記号は禁止(してはいけないこと)を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

警告

次のような医用電子機器を使用している方は使用しない

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- ・人工心肺など生命維持用医用電子機器
- ・心電計などの装着型医用電子機器

下記の場合使用しないでください

事故や肌・身体トラブルの原因になります。

- ・医療上の注意がある方
- ・顔面の神経障害、皮膚知覚障害のある方
- ・骨折・整形などで顔面に金属、シリコン、プラスチック等を埋め込んでいる方
- ・交通事故などによる頭部または眼角的後遺症のある方
- ・出血性疾患（血友病など）、血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
- ・神経障害、紫斑になりやすい方
- ・医療機関で治療中の方
- ・手術や治療を受けた部位への使用中、もしくは薬を服用中の方
- ・妊娠中、生理中、出産直後の方
- ・体力が極端に衰えている方、自ら意思表示・操作ができない方

医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する

- ・悪性腫瘍のある人
- ・施術部位に創傷や手術跡のある人
- ・重度の血行障害のある人
- ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- ・骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人の体調不良をおこす原因になります。

異常・故障時には直ちに使用を中止し、アダプターを抜く

火災・感電・けがの原因になります。
< 異常・故障例 >

- 本体、アダプター、コードが
- ・変形したり、異常に熱い
- ・異臭がする
- ・異音がある



肌の状態に不安がある

- ・アレルギー体質の方（特に金属アレルギー）
- ・皮膚病、アトピー性皮膚炎、皮膚感染症、敏感肌の方
- ・肌に傷、湿疹、はれもの、にきび、化膿、過度の日焼けなどがある部位
- ・当日脱毛処理を行った部位
- ・整形手術を行った部位

下記の状況がある方

- ・体調がすぐれない場合
- ・発熱している場合
- ・飲酒中または疲労が激しい場合

肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師に相談する

肌や身体トラブルの原因になります。

乳幼児の手の届く場所で使用・保管・放置しない

- ・窒息・誤飲など思わぬ事故につながるおそれがあります。



火中投入、加熱しない。

- ・高温になる場所（火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内）や埃のある場所での充電・使用・放置をしない。
- ・発熱・発火・破裂の原因になります。

浴室や湿気の多い所で使用したり、保管したりしない。

- ・また、水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かない。
- ・感電や火災の原因になります。

- ・コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものをせたり、挟み込んだりしない。
- ・感電やショートによる火災などの原因になります。

- ・ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。
- ・感電やけがの原因になります。

- ・掃除の際は、必ずアダプターをコンセントから抜く。
- ・感電やけがの原因になります。

- ・改造・修理はしない。
- ・火災・感電・けがの原因になります。

注意

- ・ご使用前にローラーの割れ・欠け・変形などの破損がないか確認する。
- ・けがの原因になります。

- ・落としたり、ぶつけたりしない。
- ・けがの原因になります。

- ・髪を巻き込まないように使用する。
- ・髪を傷める原因になります。
- ・髪を束ねる。またはヘアバンドやクリップなどで固定してください。

- ・他の低周波／高周波医療機器と同時に使用しない。
- ・事故やけがの原因になります。

- ・定格電源 DC5A/1A を超えるアダプターを使用しない。
- ・ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
- ・電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

- ・充電コードは付属品を使用する。
- ・出力が10Wより大きい充電コードを使用すると、故障や事故の原因になります。

- ・EMS の刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。
- ・レベルは少しずつ調整してください。
- ・EMS を感じない場合、まずはお肌をしっかり保湿してご使用ください。

- ・使いはじめや慣れるまでは、必ず EMS レベル 1 で使用する。
- ・事故やケガの原因になります。
- ・慣れてからレベルを調整してください。

- ・金属・アクセサリー類（ネックレス・イヤリング等）は外してから使用する。
- ・事故やケガの原因になります。


- ・必ずメイクを落として使用する。
- ・メイク崩れや、肌トラブルの原因になります。

- ・立って使用する場合は、転倒しやすい場所は避け、周囲の状況に十分注意する。
- ・事故やケガの原因になります。

内蔵電池についてのご注意

- ・絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- ・電池は消耗品です。また、電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
- ・通常の家庭ゴミでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体に従ってください。

各部名称

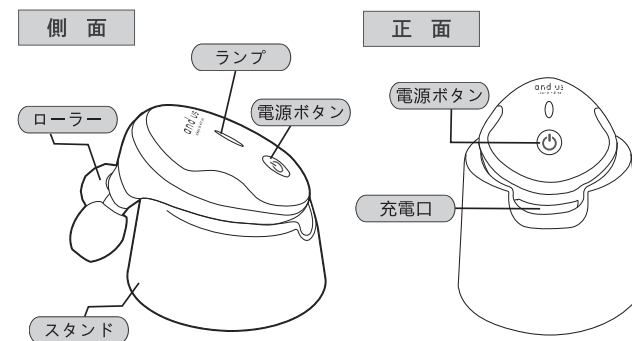

充電のしかた

初めてお使いのときや半年以上使われなかったとき、充電時間が長くなることがあります。また、充電開始数分間、充電表示ランプが点灯しないことがあります。そのまま充電していただければ点灯します。充電推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度外では充電時間が長くなったり、充電しない場合があります。

- ① 付属の充電コードを本体に差し込む
- ② 充電コードをACアダプターに接続し、コンセントに差し込む（充電ランプが赤色に点灯する）



※ACアダプターは付属しておりません

※ 5V/1A以下のACアダプターから充電してください。
(5V/1Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。)

- ③ 充電完了後（充電ランプが青色に点灯する）充電コードを取り外す。

お使いになる前に


- ・使いはじめは、1日1回約15分を週2〜3回、使用約1か月後からは1日1回の使用が目安です。
過度なお手入れは、かえって肌に良くありません。肌の様子を見ながら回数、時間などを調整し使用してください。
- ・使用中一時的に肌が赤くなったり、かゆくなる場合があります。ご使用後も症状が回復しない場合は、医師に相談してください。
- ・アクセサリー類（ネックレス、ピアスなど）は巻き込む場合がありますので、ご使用時ははずしてください。
- ・髪を巻き込まないよう、束ねるかヘアバンドなどで固定してご使用ください。また、短い髪もクリップなどで固定してください。
- ・ローラーが動きにくくなり、肌をはさみ込む原因となるため、ぬれた肌には使用しないでください。

操作方法



EMSの感じ方は個人差があります。
万が一、強い痛みを感じたり、気分が悪くなったりした場合は直ちに使用を中止してください。

- 1、電源ボタンを長押しして電源をオンにする
「ピー」と音が鳴って青色ランプが点灯し、振動モードで動作が開始します。
※電源を入れてから約5分後に自動停止します。
途中で電源を切る場合は電源ボタンを長押ししてください。
- 2、電源ボタンを短押ししてモードやEMSレベルを切り替える
電源ボタンを短押するたびに「ピー」と音が鳴り、下の順番でモード、レベルが切り替わります。

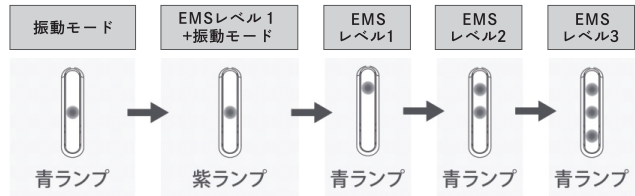

- ※初めてご使用される方はEMSレベル1からお試しいただき、慣れたらお好みに合わせてレベルを調整してください。
※本品振動+EMSモード使用時に、二つの機能の周波数が重なることで動作音が発生しますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 3、電源ボタンを長押しして電源をオフにする
「ピー」と音が鳴って青色ランプが消灯します。
約5分間使用し続けた場合も「ピー」と音が鳴り、自動的に電源がオフになります。使用後は必ずお手入れしてください。

使用方法

化粧水を塗った後ローリングしてください。

フェイスライン

- ・あご先から耳下に向かってつまみ上げるように動かす。
- ・動かす時間の目安は1秒程度



ほほ・口元

- ・口角から鼻横までを下から上にローリング。
- ・動かす時間の目安は1秒程度




太もも

- ・ひざから太ももに向けて動かす。
- ・動かす時間の目安は2秒程度




ふくらはぎ

- ・下から上に動かす。
- ・動かす時間の目安は2秒程度

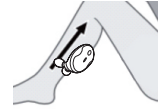


二の腕

- ・腕を上げ、上下に動かす。
- ・動かす時間の目安は往復で3秒程度

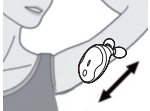


首

- ・上下に動かす。
- ・動かす時間の目安は往復で3秒程度

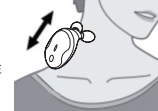


ウエスト

- ・わき腹を下上に動かす。
- ・動かす時間の目安は往復で3秒程度

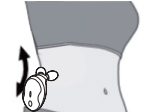


腕

- ・手首からひじに向けて動かす。
- ・動かす時間の目安は往復で3秒程度

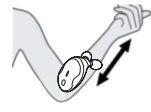

バスト

- ・わきの下から胸の中心に向けて動かす。
- ・動かす時間の目安は3秒程度

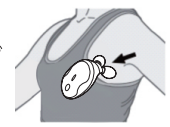

お尻

- ・足の付け根からお尻に向けて、引き上げるように動かす。
- ・動かす時間の目安は3秒程度



- ※オイルは電気を通さないため、オイルが含まれていない化粧水やフェイスクリーム等でお肌を保湿してください。
- ※1部位1回3分以内の目安でご使用ください。
- ※1ヵ所に留めず、常にゆっくり移動させてながら使用してください。
- ※肌のやわらかい部位は、はさみ込みやすいため押しあてる力と角度を調整しながらご使用ください。
- ※痛みを感じたら無理に動かさないでください。
- ※強く押しあてると、かえって肌によくありません。また、ローラーが故障することもありますので、強く押しあてずに動かしてください。
- ※頭部、目の周り、のど、粘膜や骨ばった部位には使用しないでください。

お手入れ方法

- 固形石けんをとかした水に浸した布をよくしぼり、ふき取る。
- ※アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などを使わないでください。
- 故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

保管方法

- ・高温多湿の場所（浴室、車内など）を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
- ・使用しない時は、つまずいてケガをしないよう安全な場所で保管してください。
- ・小さなお子様の手の届くところやペットの近くで保管しないでください。
- ・火気の近くで保管しないでください。
- ・長期間の保管後、再び使用する場合は、本品に異常がないことを確かめてから使用してください。
- ・長期間使用しない場合、電池の寿命を保つために1ヶ月ごとに動作し、フル充電後パッケージに保管してください。
- 長時間充電せず放置すると充電できないなどの故障の原因となります。

故障かな？と思ったら

●充電ができません

- 出力電圧が強すぎる可能性があります。
ACアダプターは出力が5V/1A以内のものを使用してください。
- 充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。
他の充電コードやACアダプターで充電をお試しください。
- 充電口に付着物がなくか確認してください。
- Type-C to Type-Cや出力の高速ケーブルでは充電できない場合があります。
必ず指定の充電コードをご使用ください。
- また、一部のモバイルバッテリーは使用できない場合がありますので、ACアダプターでの充電をお試しください。

●電源が入りません

- 充電中は使用できません。充電コードを外してから電源を入れてください。
- 充電されていないため、充電してください。
- 電源ボタンしっかりと押されていないため、しっかりと押してください。

●EMSを感じません

- お肌が乾燥している可能性があります。しっかりとお肌を保湿してください。
- オイルは電気を通さないため、化粧水やオイルが含まれないフェイスクリーム等でお肌を保湿してください。

●充電表示ランプがつかない・消える

- 充電が完了すると、消灯します
○ケーブル、アダプター、コンセントを正しく接続してください。

●使用中に電源が切れます。

- 電源を入れてから5分以上経過し、自動停止します。
- 充電が切れているため、充電してください。

●充電しても数分しか使えません。

- 充電が完了すると、消灯します
○ケーブル、アダプター、コンセントを正しく接続してください。

●充電表示ランプがつかない・消える

- 電池の寿命です。

●ローラーを動かすと音がします。

- 回転による音です。

製品仕様

品名	AUSEMS美顔ローラー
品番	2521/AUS-08
本体寸法	高さH7.7×幅W5.2×奥行D16.2cm
本体重量	約143g
スタンド含む重量	約175g
定格電源	DC 5V/1A
バッテリー	リチウムイオン電池300mAh
主な材質	ABS+亜鉛合金
充電時間	約1.5H
機能	振動、EMS
オートパワーオフ	5分間

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

SAMPLE

保証書			
品名		AUSEMS美顔ローラー	
品番		2521/AUS-08	
お客様情報	お名前	様	
	ご住所		
購入日	お名前	氏名	※ご購入日が証明できるものをお出しください。
	お名前	住所	
販売店		店名	住所
TEL			

保証規定

- 本製品は、製品保証期間内において、正常な状態・状況でご使用の場合に限り品質を保証いたします。万が一、商品に不良故障がありましたときには、交換対応させて頂きますので、その際には弊社もしくは販売店までご連絡ください。
- ・下記の条件にあてはまる場合には保証が無効になる可能性があります。
 - 1、保証書をご提示いただけない場合。
 - 2、所定の項目をご記入いただけない場合、字句を書き換えた場合。
 - 3、故障の原因が取扱以上の不注意、故意によるものの場合。
 - 4、天災地災、その他あらゆる外部要因による故障、損傷。
 - 5、通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷。
 - ・お客様ご自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換はお受けできません。
 - ・本保証は正規取扱店での新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション、中古品、転売品等については保証範囲に含まれません。
 - ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。
 - 無くされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
 - ・本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害（営業損失、運賃、諸経費等）は、保証対象に含まれません。
 - ・本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - ・保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 - ・本保証書は日本国内のみで効です。(This warranty is valid only in Japan)

お問い合わせ先

リンクサス株式会社
大阪府大阪市中央区大手通1-3-5KT大手
通ビル7F

▶ TEL：06-6949-9480

受付時間：10:00~12:00/13:00~16:00
月～金（土・日・祝日及び弊社の休日を除く）

- ※時間帯により電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
- ※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
- ※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

お問い合わせの前に・・・取扱説明書内の「故障かな？と思ったら」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

・品番 ・色 ・お買い上げ店名 ・お問い合わせ内容 ・お買い上げ日